

SHOPPRIDER®



UL8WSLA

Guide De L'Utilisateur

Redécouvrez votre monde, en grand style

 **éclipse**
produits médicaux

Table Des Matières

Introduction.....	3
Avertissement: IEM.....	4
Directives générales relatives à la sécurité.....	6
Préparation à l'emploi	8
Caractéristiques.....	9
Levier de roue libre	12
Démontage	13
Les batteries et leur recharge	14
Soin et entretien.....	17
Dépannage.....	19
Information de garantie.....	21
Spécifications	22
Options	23

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre quadriporteur de marque Shoprider. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer à vous servir de votre quadriporteur. Si vous avez toujours des questions ou des préoccupations après avoir lu le guide, n'hésitez pas à contacter votre dépositaire agréé.

Avant de lire le reste du manuel, s'il vous plaît enregistrer votre produit en ligne à www.eclipsemedical.com .

Vous devez conserver votre reçu comme preuve d'achat pour la garantie soit valide, vous devrez présenter lors de la réception du service ou la réparation de votre produit sous garantie.

S'il vous plaît remplir les informations ci-dessous pour vos dossiers.

Modèle

N° de série

Date de l'achat:

Dépositaire:

Avertissement: IEM

Avertissement relatif à la perturbation électromagnétique (EMI)

Perturbation électromagnétique due aux ondes radioélectriques

Les quadriporteurs électriques peuvent être affectés par la perturbation électromagnétique (EMI), une énergie électromagnétique perturbatrice provenant de sources telles les stations radioélectriques, les stations de télévision, les radio-amateurs, les radios bidirectionnelles et les téléphones cellulaires. La perturbation (de source radioélectrique) peut provoquer le desserrement du frein, le déplacement ou le changement de direction spontanés du quadriporteur électrique (sans votre intervention). Elle peut aussi causer des dommages permanents au système de commande du quadriporteur électrique.

On peut classer les sources d'émission de perturbations électromagnétiques selon trois grands types:

1. Émetteurs-récepteurs portatifs de poche munis d'une antenne montée directement sur l'appareil de transmission. À titre d'exemples : postes bande publique, walkies-talkies, émetteurs-récepteurs utilisés par les pompiers ou les policiers, téléphones cellulaires et autres appareils de communication personnels. ****NOTE** : certains téléphones cellulaires et autres appareils similaires émettent des signaux quand ils sont allumés (« ON »), même quand on ne les utilise pas.
2. Émetteurs-récepteurs mobiles de portée moyenne tels ceux qu'on utilise dans les voitures de police, les camions de pompier, les ambulances et les taxis. L'antenne est habituellement installée à l'extérieur du véhicule.
3. Émetteurs et émetteurs-récepteurs de longue portée tels les émetteurs de radiotélévision (pylônes d'antennes de radio et télévision) et les radio-amateurs. ****NOTE** : à notre connaissance, les autres types d'appareils portatifs de poche tels les téléphones sans fil, les ordinateurs portatifs, les radios AM/FM, les téléviseurs, les lecteurs de CD, les lecteurs de cassettes et les petits appareils électriques tels les rasoirs électriques et les séchoirs à cheveux électriques, ne sont pas susceptibles de causer des problèmes à votre quadriporteur électrique.

Perturbation électromagnétique du quadriporteur électrique

Vu que l'énergie électromagnétique devient plus intense à mesure qu'on se rapproche de l'antenne qui la transmet (de sa source), les champs électromagnétiques de sources radioélectriques portatives (émetteurs-récepteurs) méritent une attention spéciale. Quand on utilise ces appareils, on peut sans le vouloir placer des sources importantes d'énergie électromagnétique très près du système de commande du quadriporteur électrique, ce qui peut affecter les mouvements et le freinage du quadriporteur électrique.

Par conséquent, les avertissements qui suivent sont des recommandations visant à prévenir les perturbations pouvant affecter le système de commande du quadriporteur électrique.

Avertissements

Les avertissements énumérés ci-dessous visent à réduire les chances que le frein du quadriporteur se desserre ou que le quadriporteur électrique se déplace de façon spontanée (sans intervention humaine), ce qui pourrait causer des blessures graves.

1. Ne vous servez pas d'appareils émetteurs-transmetteurs comme les postes bande publique, et n'allumez pas d'appareil de communication personnel comme les téléphones cellulaires, quand le quadriporteur électrique est allumé (clé de contact à «ON»).
2. Repérez les transmetteurs qui se trouvent près de vous, comme les stations de radio et de télévision, et efforcez-vous d'éviter de vous en approcher.
3. Si le quadriporteur se déplace ou si le frein se desserre sans votre intervention, éteignez le contact du quadriporteur électrique (tournez la clé à « OFF ») dès que vous pouvez le faire en toute sécurité.
4. Soyez conscient que l'ajout d'accessoires ou d'éléments au quadriporteur électrique, ou la modification de celui-ci, peuvent le rendre plus susceptible aux perturbations électromagnétiques. (NOTE: il n'existe pas de moyen facile d'évaluer l'immunité globale du quadriporteur électrique.)
5. Signalez à votre dépositaire tout incident où le quadriporteur se déplace et où le frein se desserre de façon spontanée (sans votre intervention), et notez s'il y a des sources de perturbation électromagnétique dans les environs.
- 6.

Directives générales relatives à la sécurité

Ne pas conduire le fauteuil motorisé Shoprider sans avoir lu ce manuel d'instructions.

1. Ne pas aborder de pente ayant une inclinaison de plus de 9°.
2. Ne pas manoeuvrer la manette de commande de faeson irrégulière en montant ou descendant une pente.
3. Ne pas actionner l'interrupteur MARCHE/ARRÊT lorsqu'en mouvement. Cela activerait immédiatement les freins et pourrait occasionner des dommages au système de commande.
4. Ne pas conduire sur un terrain mou ou cahoteux (boue, gravier non compacte, herbe haute).
5. Ne pas tenter de franchir un obstacle excédant une hauteur de 5cm (2").
6. Ne pas tenter une montée ou de franchir un obstacle en angle.
7. Ne pas transporter de passager.
8. Ne pas monter ou descendre de votre fauteuil motorisé *Shoprider* avant que les freins ne soient engagés et le système de commande hors circuit.
9. Ne pas utiliser le fauteuil motorisé *Shoprider* si l'unité est en mode de roulement libre.
10. Ne pas conduire dans la rue, excepté pour les traverses entre les trottoirs.
11. Ne pas s'asseoir sur votre fauteuil motorisé *Shoprider* a bord d'un véhicule, se'transférer plutôt sur un siège du véhicule.
12. Toujours faire un arrêt complet avant d'effectuer un changement de direction.
13. Toujours reduire la vitesse lors d'une descente (déplacer la manette doucement)
14. Vers la position centrale a pour effet de reduire la vitesse).
15. Toujours s'engager dans une courbe a basse vitesse.
16. Toujours s'engager dans une courbe ou une pente avec un angle de 90°.
17. Toujours garder vos pieds sur la plaque de l'appui-pied pendant les déplacements.
18. Toujours maintenir les pneus avec la pression approprié.

19. Toujours s'assurer que vos batteries sont complètement chargées avant
D'entreprendre une randonnée pour la journée.

Rappelez-vous de prendre en considération les piétons lorsque vous conduisez votre fauteuil motorisé *Shoprider*.

Préparation à l'emploi

Votre fauteuil roulant électrique possède de nombreuses caractéristiques conçues pour vous apporter un confort maximum et est prêt pour un usage immédiat après assemblage et livraison par votre fournisseur. Des réglages peuvent être apportés aux éléments suivants :

1. La plaque d'appui pour pied peut être réglée au niveau de la distance du châssis selon quatre positions différentes. Voir page 9.
2. La plaque d'appui pour pied peut être positionnée selon différentes hauteurs variées. Voir page 9.
3. Les accoudoirs peuvent être réglés selon différents angles et profondeurs. Voir pages 9 à 10.
4. La manette de contrôle peut être ajustée pour un usage de la main droite ou de la main gauche. Voir page 10.
5. Le siège possède quatre montants qui s'ajustent avec des tiges. Voir page 10.
6. Assurez-vous que les batteries sont connectées et rechargées environ 6 à 8 heures avant la première utilisation. Voir page 15 à 17.

Caractéristiques

MISE EN GARDE : Les réglages du siège ne doivent pas être effectués lorsque vous êtes assis sur votre fauteuil roulant électrique.

Tout autre réglage doit être effectué lorsque vous êtes assis sur votre fauteuil électrique.

Réglage du repose-pied

Longueur

Retirez la tige de contact du trou du tube coulissant du repose-pied.

Faites glisser le tube du repose-pied et repositionnez la tige de contact en vous assurant que celle-ci dépasse de la partie inférieure du tube et est stabilisée dans le trou approprié lorsque la longueur désirée est atteinte. Il existe quatre positions possibles.



Hauteur

Retirez la tige de contact située derrière le tube coulissant du repose-pied et positionnez celui-ci à hauteur désirée. Il y a six hauteurs disponibles. Réajustez la tige de contact dans le trou approprié et assurez-vous que celle-ci dépasse de l'autre côté du tube et qu'elle est stable. 9

Réglage des accoudoirs

Bascule

Soulevez les accoudoirs, ce qui déverrouillera le tube de l'accoudoir de sa base, pour vous permettre de vous déplacer facilement dans et hors de votre siège.

Profondeur

Sous l'arrière du siège du fauteuil roulant électrique vous trouverez deux « vis de blocage », une de chaque côté de celui-ci. Relâchez les vis et faites glisser chacun des tubes de l'accoudoir vers l'extérieur jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte et resserrez la vis de blocage.



Réglage du siège

Hauteur

Situés sur le châssis, les quatre montants du siège soutenant celui-ci ont quatre trous d'ajustement de la hauteur. En ajustant les tiges d'acier dans n'importe lequel des trous, quatre hauteurs peuvent être atteintes.




Réglage de la manette de commande

Conversion main gauche/droite

Vous pouvez positionner la « manette de commande » de manière à ce que l'opérateur puisse l'utiliser soit de la main gauche soit de la main droite. Sous l'accoudoir droit vous trouverez deux vis au niveau de la charnière. Dévissez les vis et enlevez l'assemblage complet des accoudoirs des deux côtés. Une fois que vous avez enlevé les deux assemblages des accoudoirs, remontez-les du côté opposé (le gauche du côté droit etc.)



Contrôleur

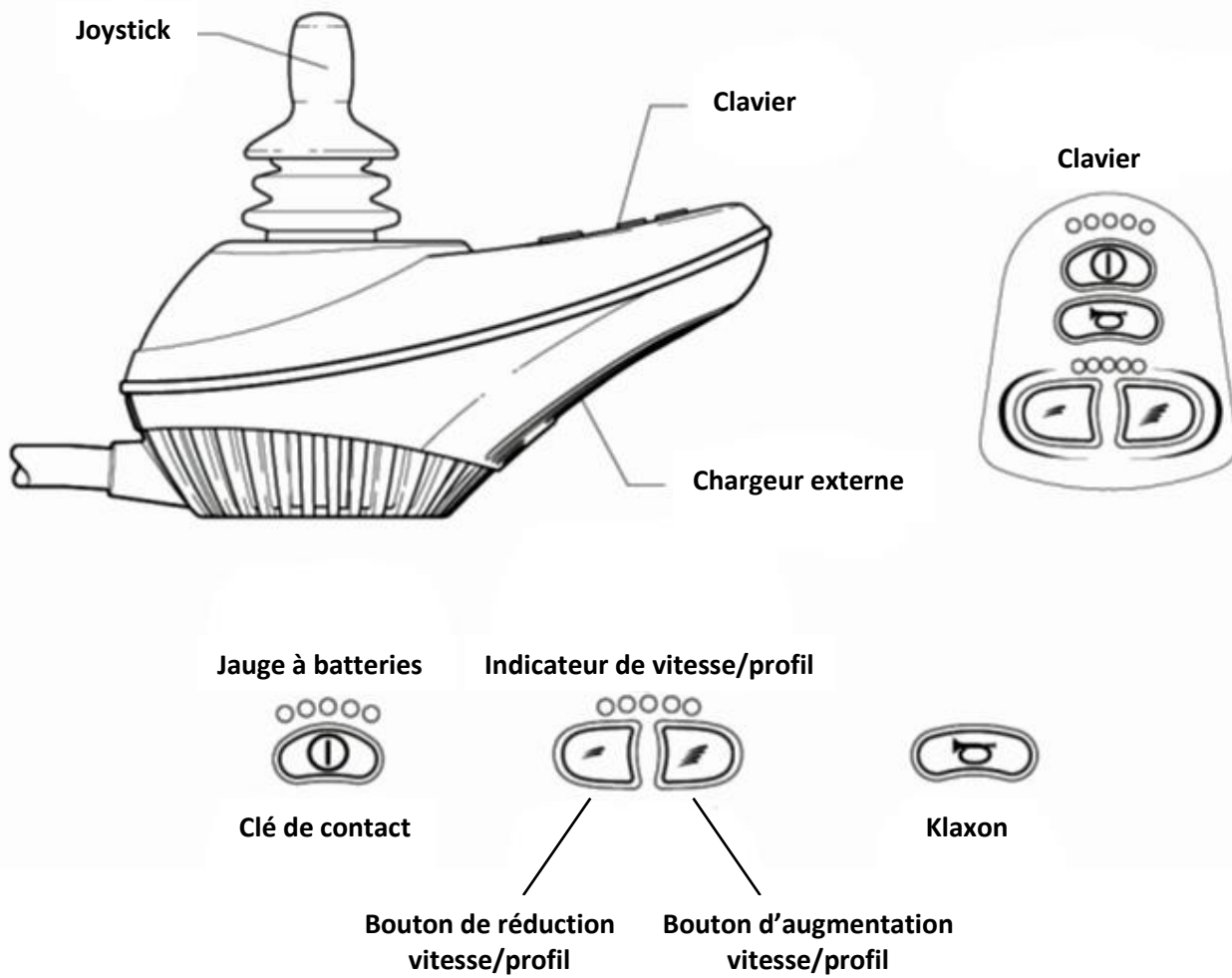

Levier de roue libre

Dans le cas d'une anomalie ou d'une panne de batterie, il se peut que les freins se désenclenchent permettant au fauteuil de faire « roue libre » et d'être déplacé manuellement



Pour enclencher le mode « roue libre », localisez les leviers jaunes. Veuillez consulter les photos N°6 et N°7 ci-dessus. Les leviers sont équipés d'embouts jaunes et sont abaissés afin de désenclencher les freins et de mettre le fauteuil en mode « roue libre ». Pour réenclencher les freins, soulevez les deux leviers jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

**MISE EN GARDE : DÉSENCLENCHEZ TOUJOURS LE
MÉCANISME ROUE LIBRE LORSQUE VOUS N'EN AVEZ
PLUS BESOIN. SINON IL Y A DES RISQUES DE BLESSURES !**

Démontage

MISE EN GARDE :
DÉMONTEZ ET SOULEVEZ LES COMPOSANTS DU FAUTEUIL AVEC PRÉCAUTION. VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE LA PERSONNE ENTREPRENANT CETTE PROCÉDURE EST CAPABLE PHYSIQUEMENT DE SOULEVER LE POIDS EN CAUSE

1. Assurez-vous que l'endroit où le fauteuil électrique sera démonté est suffisamment spacieux pour contenir tous les composants.
2. On peut retirer les accoudoirs afin que le siège soit plus léger à soulever. Sous l'arrière du siège, vous trouverez deux « vis de blocage ». Relâchez-les toutes les deux en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et enlevez les accoudoirs en les faisant coulisser de chaque côté.
3. Repliez le dossier du siège vers l'avant.
4. Débranchez le cordon d'alimentation provenant de la manette/appareil de contrôle à l'arrière de l'appareil en appuyant sur la clenche de votre main gauche et en tirant avec fermeté la prise du câble de votre main droite.
5. Tenez-vous derrière le siège et tout en le maintenant des deux mains soulevez-le vers le haut en le tenant bien droit jusqu'à ce qu'il soit déboîté de son montant.
6. Débranchez le cordon d'alimentation provenant de la manette/boîtier de commande à l'arrière de l'appareil en appuyant sur la clenche de votre main gauche et en tirant avec fermeté la prise du câble de votre main droite.
7. Vous pouvez maintenant enlever le siège en desserrant suffisamment les deux boutons de chaque côté de la charnière pour glisser le siège dans et hors de celle-ci.
8. Soutenez-vous d'une main au montant du siège. De l'autre main soulevez le levier jaune de déclenchement pour libérer et séparer le châssis de l'axe transversal (partie arrière) du fauteuil.

POUR RÉASSEMBLER VOTRE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE IL VOUS SUFFIT D'INVERSER LES PROCÉDURES DÉCRITES CI-DESSUS.

Les batteries et leur recharge

BATTERIES : Votre fauteuil motorisé utilise deux batteries à longue durée de 12 V 12 ah. Ces batteries à décharge poussée sont scellées et n'exigent aucun entretien. Parce qu'elles sont scellées, vous n'avez pas à vérifier le niveau d'électrolyte.

Comme les batteries de votre fauteuil roulant électrique sont scellées, il y a de grande chance qu'elles soient acceptées pour le transport à bord de tout appareil aérien. Veuillez consulter votre transporteur avant le départ comme il leur faudra être averti par avance que vous souhaitiez qu'il transporte des batteries. **REMARQUE** : Chaque transporteur se réserve le droit de transporter ce qui peut être qualifié de "MARCHANDISE DANGEREUSE". Shoprider ne peut être responsable de leur décision finale.

LE CHARGEUR À BATTERIE : Le chargeur à batterie fourni est spécifique à votre fauteuil roulant électrique et peut ne pas convenir à tout autre produit de mobilité électrique. **Utilisez seulement le chargeur fourni avec votre fauteuil roulant électrique** ; tout autre modèle de chargeur peut endommager de façon permanente les batteries de votre fauteuil roulant électrique et annulerait la garantie.

RECHARGER LES BATTERIES : Les batteries de votre fauteuil roulant électrique devront être rechargées lorsque l'indicateur de l'état des batteries, situé sur la manette de commande, est dans la barre de position ROUGE. **REMARQUE** : **Les batteries auront une durée de vie plus longue si vous n'utilisez pas toute leur énergie**, et que vous les rechargez aussitôt que l'indicateur à batterie atteint les barres rouges.

**LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER
UNE DÉFAILLANCE DES BATTERIES.**

La recharge des batteries de votre fauteuil roulant électrique

1. Appuyez sur le bouton “OFF” (ARRÊT) du boîtier de la « manette de commande » de votre fauteuil roulant électrique.
2. Positionnez le commutateur à l'extrémité du chargeur sur “OFF” (ARRÊT).
3. Branchez la fiche à « trois lames » située à l'extrémité opposée du chargeur au commutateur, dans le réceptacle situé sous le boîtier de la « manette de commande » en vous assurant que les trois lames sont alignées avec le réceptacle.
4. Lorsque les batteries ont été entièrement rechargées le témoin lumineux de recharge deviendra vert et **le chargeur s'arrêtera automatiquement.**
5. Lorsque la recharge est terminée, enlevez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant murale et retirez délicatement sur le cordon pour le remettre en place.
6. Quand la recharge est terminée, enlevez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant murale et tirez délicatement le cordon sous le boîtier de la manette de commande.

MISE EN GARDE :

1. Ne fumez pas ou n'utilisez pas de flamme nue pendant que vos batteries sont en recharge.
2. N'utilisez pas une rallonge électrique à moins que cela ne soit absolument nécessaire. L'utilisation d'une rallonge électrique peut entraîner un risque d'incendie et de choc électrique.
3. N'utilisez en aucun cas le chargeur si celui-ci a reçu un choc, est tombé ou a été mal utilisé. Apportez-le à un technicien qualifié.
4. Ne démontez pas le chargeur. Cela annulera la garantie.
4. **Ne pas éteindre, débrancher ou interrompre le cycle de recharge si celui-ci n'est pas terminé.** Assurez-vous que le témoin indicateur de recharge est vert avant de débrancher votre chargeur.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UNE DÉFAILLANCE DES BATTERIES.

Guide pour des batteries sûres et durables

1. Pour une durée de vie plus longue vos batteries doivent être rechargées vérifiez l'indicateur de batterie-une charge complète est de 85 minutes.
2. Si vous n'utilisez pas votre fauteuil roulant électrique pendant une longue période une recharge réparatrice devrait être effectuée tous les mois. Ne laissez jamais vos batteries dans un état déchargé. Ceci est particulièrement important pour les batteries scellées telles que celles de votre fauteuil roulant électrique.
3. Si votre fauteuil roulant électrique a été entreposé pendant quelques temps, rechargez vos batteries avant de le réutiliser.
4. Vérifiez les connexions de vos batteries tous les six mois en vous assurant qu'elles sont bien serrées et propres.

Vous constaterez que la distance que votre fauteuil roulant électrique peut parcourir augmentera progressivement au cours des toutes premières semaines d'utilisation comme les batteries atteignent leur efficacité optimale après environ 12 cycles de recharge et de décharge complets.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UNE DÉFAILLANCE DES BATTERIES.

Les batteries ne sont pas garanties par Éclipse Produits Médicaux

Soin et entretien

Votre fauteuil roulant électrique, comme tout autre appareil électromécanique, tirera les bénéfices d'une révision régulière auprès de votre fournisseur Shoprider. Vous aussi vous pouvez aider à maintenir votre fauteuil roulant électrique dans d'excellentes conditions en suivant les indications simples pour une maintenance à domicile telles qu'indiquées ci-dessous :

MISE EN GARDE : Seuls des techniciens qualifiés doivent effectuer des travaux de révision.

MISE EN GARDE : N'arrosez pas votre fauteuil roulant électrique. L'eau pourrait s'infiltrer dans les parties électroniques et provoquer des dommages permanents.

N'entreposez PAS votre fauteuil roulant électrique dans des endroits humides. Cela peut endommager l'électronique s'il y est entreposé pendant de longues périodes.

GARNITURE DU SIÈGE : Un tissu humide et un savon doux vous aideront à maintenir votre siège et le dossier en bon état. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs car ceux-ci endommageront le revêtement. Les nettoyeurs chimiques peuvent aussi endommager la garniture.

Les rayons ultraviolets peuvent aussi réduire la durée de vie du revêtement de rembourrage. C'est un processus de vieillissement normal qui ne peut être couvert par la garantie (veuillez consulter les exclusions dans la section des conditions de garantie).

CARROSSERIE : La carrosserie de votre fauteuil roulant électrique peut être lavée délicatement au savon doux et à l'eau. On peut utiliser de l'encaustique pour voiture pour conserver la peinture dans sa condition d'origine. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de détergents forts car ils feront disparaître la couleur.

ÉLECTRONIQUE : Les révisions du mécanisme électrique et du chargeur doivent seulement être effectuées par votre fournisseur local de révision Shoprider. Ces unités sont scellées et ne doivent pas être ouvertes. **LES SCEAUX BRISÉS ANNULERONT VOTRE GARANTIE.**

Vous constaterez que la distance que votre fauteuil roulant électrique peut parcourir augmentera progressivement au cours des toutes premières semaines d'utilisation comme les batteries atteignent leur efficacité optimale après environ 12 cycles de décharge et de recharge.

NE PAS faire fonctionner votre fauteuil roulant électrique durant des intempéries, par exemple lors de forte pluie ou de neige.

NE PAS utiliser dans de l'eau profonde. Cela pourrait endommager l'appareil de contrôle électrique principal.

FREINS MOTEURS – si les freins moteurs fonctionnent correctement, vous ne pourrez pas pousser votre appareil lorsque celui-ci est éteint ou qu'il est en marche avec l'accélérateur de commande de vitesse en position neutre.

Si vous pouvez pousser votre fauteuil roulant électrique tel que décrit dans la situation ci-dessus, les freins moteurs peuvent être défaillants. **Veillez ne pas utiliser le fauteuil roulant électrique et contacter votre fournisseur Shoprider immédiatement.**

REMARQUE DE SÉCURITÉ : Pour votre propre sécurité nous vous recommandons de vérifier la fonctionnalité des freins de votre fauteuil roulant électrique avant toute sortie.

FREIN DE TRANSMISSION – Lorsque vous conduisez votre fauteuil roulant électrique et relâchez la « manette de commande » de vitesse, votre fauteuil roulant électrique devrait réduire la vitesse très rapidement. Si vous remarquez un changement de l'état normal de conduite/ralentissement et que votre fauteuil roulant électrique ne ralentit pas rapidement, veuillez ne pas l'utiliser et contacter votre fournisseur Shoprider.

PNEUS – Votre fauteuil roulant électrique peut être accompagné de pneus remplis ou non remplis d'air. Vérifiez l'état de vos pneus régulièrement. Recherchez les signes d'usure, de coupures ou d'objets étrangers logés dans la bande de roulement.

BATTERIES – Conservez vos batteries bien rechargées (consultez la section sur la recharge des batteries). Gardez les batteries propres et dans un endroit sec à l'abri du gel. Gardez les bornes des batteries bien serrées.

IMPORTANT : Il n'est pas possible de prédire la durée de vie de vos batteries. Ceci est dû principalement aux différents usages auxquels la batterie est sujette.

Certains utilisateurs utiliseront leur fauteuil roulant électrique tous les jours et pendant de longues périodes. Leurs batteries se déchargeront presque entièrement entre les recharges et la durée de vie de leurs batteries sera courte (12 mois ou moins dans certains cas). D'autres utilisateurs de fauteuils roulants électriques utiliseront leur appareil moins fréquemment et exposeront leurs batteries à un mode de décharge moins exigeant. Ces batteries auront probablement une durée de vie plus longue (de 12 à 24 mois ou plus long).

Lorsque vous avez besoin de changer les batteries, insistez toujours pour obtenir le modèle d'équipement standard pour votre fauteuil roulant électrique. Si vous êtes incertain, consultez votre fournisseur Shoprider local agréé.

Dépannage

Si votre appareil roulant électrique ne « démarre » pas :

Assurez-vous que le bouton ON/OFF (ARRÊT/MARCHE) est positionné sur marche. S'il est en marche, l'indicateur de l'état des batteries fonctionnera.

Le témoin lumineux de recharge des batteries ne s'éclaire pas :

- a. Vérifiez que votre chargeur est branché dans une prise de courant murale.*
- b. Si la lumière est toujours éteinte assurez-vous que toutes les autres connections sont branchées.*
- c. Si témoin lumineux ne s'éclaire toujours pas contactez votre fournisseur local dès que possible*

Si l'indicateur de l'état des batteries ne fonctionne pas lorsque le bouton est en position "on", vérifiez ceci :

Assurez-vous que le chargeur de batterie n'est pas branché dans la prise de courant murale. Cela empêche la transmission.

Si votre fauteuil roulant électrique ne ralentit pas ou que la commande de vitesse variable ne fonctionne pas :

Éteignez le bouton de mise en marche " on/off" et informez votre fournisseur Shoprider.

MISE EN GARDE : Si vous constatez que pour quelque raison que ce soit votre fauteuil roulant électrique ne réduit pas la vitesse lorsque vous relâchez la manette de commande, éteignez votre fauteuil à l'aide du bouton on/off. Le frein de stationnement s'activera immédiatement et arrêtera votre fauteuil roulant électrique. Sachez que le fauteuil s'arrêtera brusquement, donc soutenez-vous au guidon, attachez votre sangle de sécurité et enfoncez-vous dans votre siège.

Si vous constatez que pour quelque raison que ce soit votre fauteuil roulant électrique n'avance pas correctement ou fait un bruit inhabituel arrêtez de l'utiliser. Ne prenez aucun **RISQUE**, contactez votre fournisseur Shoprider qui sera capable de vous conseiller.

DESCRIPTION GÉNÉRALE : L'appareil de contrôle du fauteuil roulant électrique est incorporé d'un modèle de microprocesseur sophistiqué. L'appareil de contrôle du

fauteuil contrôle de façon continue le système de fonctionnement et assure un fonctionnement fiable en toute sécurité.

LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ CONTROLLÉES COMPRENNENT :

- L'intégrité du système de commande de la vitesse
- Les voltages et les circuits internes
- Les voltages et les circuits du moteur
- Le relais isolant de sûreté
- Le voltage des batteries

Pour assurer la sécurité, l'appareil de contrôle ne fonctionnera pas si la manette de commande est dans la position neutre.

Le fauteuil s'éteint au bout de 10 minutes :

L'appareil de contrôle se mettra automatiquement en « mode veille » après avoir été laissé en marche plus de 10 minutes. Éteignez l'appareil de contrôle et rallumez-le.

L'appareil de contrôle est en position marche mais rien ne se passe :

L'appareil de contrôle peut être verrouillé pour prévenir tout usage non autorisé.

Pour verrouiller :

1. Lorsque l'appareil de contrôle est en position marche appuyez et maintenez le bouton on/off pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Relâchez le bouton on/off.
2. Poussez la manette vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un bip
3. Poussez la manette vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un bip
4. Relâchez la manette et vous entendrez un long bip
5. L'appareil de contrôle est maintenant verrouillé

Pour déverrouiller :

1. Mettez en marche l'appareil de contrôle. Vous verrez l'indicateur de vitesse se déplacer de haut en bas.
2. Poussez la manette vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un bip
3. Poussez la manette vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un bip
4. Relâchez la manette et vous entendrez un long bip
5. L'appareil de contrôle est maintenant déverrouillé

Information de garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur original. Vous devrez présenter votre reçu original comme preuve d'achat avant toute application de la garantie.

La présente garantie couvre les défaillances causées par des défauts de matières ou de construction qui surviennent lors d'une utilisation normale et ne couvre pas les dommages qui surviennent pendant le transport ou les défaillances causées par des produits non fournis par **Produits médicaux Éclipse inc.** ou les défaillances résultant d'accidents, de mauvais emploi, de négligence, de mauvaise manutention, de mauvais usage, d'altération, de modification, d'usage commercial ou par toute personne autre qu'un dépositaire autorisé, ou de dommages attribuable à des cas de force majeure.

La présente garantie ne couvre pas la négligence ou le mauvais emploi, l'utilisation de pièces ou les changement non autorisés par **Produits médicaux Éclipse inc.**, ou les poids dépassant la charge maximale spécifiée dans le Guide d'utilisation du produit.

La présente garantie n'inclut pas les frais de main-d'œuvre.

La présente garantie n'inclut pas les frais d'expédition encourus par l'acheteur pour retourner les pièces défectueuses en vue de leur réparation ou de leur remplacement.

L'entretien sous garantie doit être fait par un **Dépositaire** autorisé de **Produits médicaux Éclipse inc.**

Ne retournez pas de pièces comportant un défaut / une défectuosité sans autorisation écrite.

La présente garantie s'applique aux produits achetés au Canada.

La présente garantie est annulée si l'étiquette du numéro de série originale a été enlevée du produit ou altérée de quelque façon que ce soit.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

5 ANS	CADRE
2 ANS	MOTEUR, TRANSAXE, FREIN
1 AN	CÂBLAGE, DISPOSITIF DE COMMANDE, SYSTÈME ÉLECTRONIQUE, SUSPENSION, SIÈGE BASCULEUR ÉLECTRIQUE
6 MOIS	TOUTES LES AUTRES COMPOSANTES ORIGINALES TELLES LES ROUES, LE GARNISSAGE, LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC, LES SURFACES PEINTES, LES BALAIS DE MOTEUR ET LES AMPOULES.

Spécifications

Shoprider UL8WSLA		
Dimensions: L x L x H	cm (pouces)	76(30) x 55(21.5) x 81(32)
Charge total (avec batteries, siege)	kg (lb)	47 (104)
Batteries	_V_Ah x unités	12V 12Ah x 2
Chargeur	V/A	24V 2A, non transporté
Nombre, grandeur de pneus	Avant	2 x 6"
	Arrère	2 x 9"
Puissance du moteur	hp	0.5 x 2
Vitesse maximale	km/hr (mph)	6 (3.9)
Max. d'autonomie avec une charge complète (dépendant du poids et du terrain)	km (mile)	14 (9)
Poids maximum autorisé	kg (lb)	113 (250)

****Toutes specifications peuvent changes sans pré-avis****

Options

CANNE1	Porte-cannes simple
CANNE2	Porte-cannes double
TOIT	Toit pour quadriporteur
PORTE-OXYGÈNE	Support à oxygène
SAC ARRIÈRE	Sac fourre-tout repliable
PORTE-MARCHETTE	Support pour marchette

Fabriqué par:

Pihsiang Machinery Mfg. Co., Ltd.
No. 108 Hsin-He Road
Hsin-Feng Shiang
HsinChu 304, Taiwan

Distribué par:

Produits médicaux Éclipse inc.
110 – 725 Eaton Way
Delta, Colombie-Britannique
Canada V3M 6S5
Tél. : 604-540-0114 Téléc. : 604-540-0172
www.eclipsemedical.com

Produits médicaux Éclipse inc.
106, avenue Nordic
Pointe-Claire, Québec
Canada H9R 3Y2
Tél. : 514-428-5996 Téléc. : 514-694-1299
www.eclipsemedical.com